



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Máy điện châm Lanaform Stim Fit của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy điện châm Stim Fit
- 4 tấm dán keo
- 2 dây điện cực, 1 dây sạc USB và adapter
- Phiếu bảo hành, HDSD tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Một số lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm:

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi kết nối sử dụng sản phẩm.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử dụng sản phẩm.
- Không tháo rời, tự sửa chữa thiết bị. Bạn có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây tai nạn trong nhà.
- Không sử dụng sản phẩm thay thế cho việc điều trị y tế, nó chỉ dành cho việc massage điều trị tại gia đình.
- Không sử dụng thiết bị cho trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị trong khi lái xe, bạn có thể gây tai nạn khi bị giật mình do kích ứng cơ
- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen hoặc trong môi trường ẩm ướt cao.

- Không sử dụng sản phẩm trong lúc ngủ, các điện cực có thể bị dịch chuyển đến các vị trí không phù hợp trong lúc bạn ngủ gây khó chịu.
- Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín có sử dụng bình xịt hoặc trong phòng có sự quản lý về lượng oxy
- Không sử dụng thiết bị trong vòng 1 tiếng trước hoặc sau bữa ăn, hay khi đi ngủ. Tác dụng kích thích hoặc massage của thiết bị có thể gây cản trở giấc ngủ hoặc phá vỡ tiêu hóa.
- Trong lúc sử dụng, không cho phép bất kỳ một sản phẩm nào bằng kim loại tiếp xúc với các điện cực. Việc có kim loại tiếp xúc với điện cực có thể gây tăng kích ứng làm ảnh hưởng đến bạn.
- Có thể sử dụng mỹ phẩm dạng gel để tăng hiệu quả điều trị của sản phẩm.

2. Thận trọng trước khi sử dụng

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong các trường hợp sau:

Nếu bạn có bệnh tim

Phụ nữ có thai và đang cho con bú

Nếu bạn đang sốt cao, có bệnh truyền nhiễm, có u ác tính hoặc bệnh cấp tính.

Nếu bạn có da nhạy cảm

Nếu bạn mới trải qua phẫu thuật hoặc đang điều trị chấn thương sau tai nạn

- Không sử dụng sản phẩm với các thiết bị y tế sau:

Thiết bị y tế cho việc cấy ghép như máy tạo nhịp tim.

Thiết bị nhân tạo cấy ghép trong cơ thể như : tim nhân tạo, phổi nhân tạo, ...



- Nếu cơ thể hoặc da của bạn gây phản ứng bất thường như tấy đỏ, đau đớn ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Không sử dụng sản phẩm trên phần cơ thể bị sưng viêm hoặc phát ban.
- Không sử dụng điện cực tại vết thương hở, điều này có thể gây nhiễm trùng hoặc làm nghiêm trọng thêm tổn thương

3. Cấu tạo sản phẩm: (sơ đồ 1)

1. Đầu ra kết nối
2. Nút nguồn ON/OFF
3. Cổng USB
4. Thân máy chính
5. “M” -Nút chọn chế độ massage
6. Nút chọn cường độ massage
7. Nút tạm dừng
8. Điều chỉnh thời gian (10 đến 60 phút)
9. Tấm giữ điện cực
10. Điện cực
11. Dây điện cực
12. Dây cáp USB
13. Adapter

Màn hình:

1. Thời gian massage
2. Chế độ:
 - a) Nhào. miết
 - b)Châm cứu
 - c) Đấm
 - d) Nhéo, lăn
 - e) Hút hơi
 - f) Kết hợp 5 phương pháp trên
3. Cường độ massage (10 cấp)
4. Pin hiển thị

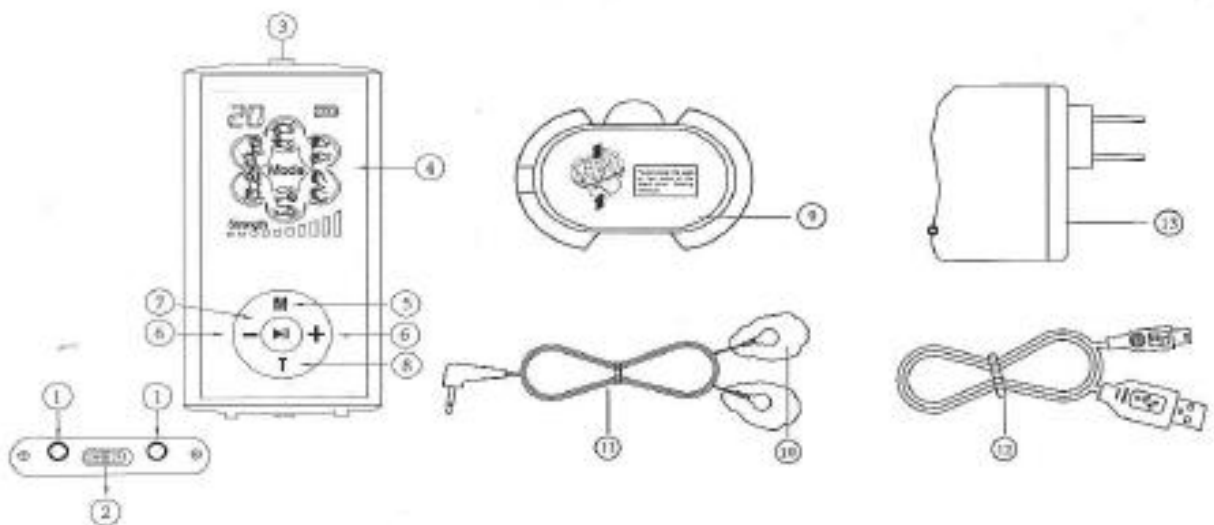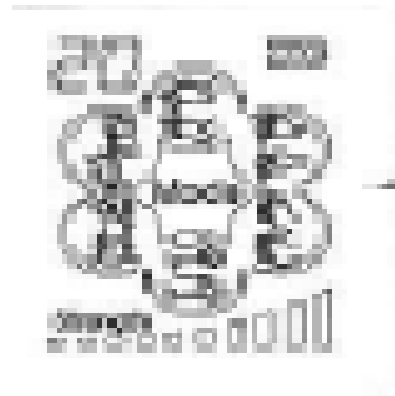

4. Hướng dẫn sử dụng

- Chuẩn bị trước khi sử dụng:
Kiểm tra pin, pin phải sạc đầy trước khi sử dụng
- Vệ sinh da sạch sẽ và lau khô trước khi sử dụng. Đặt các điện cực vào nơi bạn muốn massage sau đó kết nối với dây điện cực

Sơ đồ hiển thị vị trí của điện cực (sơ đồ bên)



Chúng tôi khuyên bạn nên đặt điện cực theo đôi vào các phần cơ thể cần massage (như ví dụ minh họa bên cạnh)

Lưu ý:

- ✓ Không đặt các điện cực vào đầu.
- ✓ Không di chuyển điện cực khi máy đang hoạt động.



5. Hoạt động

- Sau khi đặt điện cực vào vị trí cần massage điều trị, ấn nút ON/OFF để khởi động máy.
- Máy hoạt động theo chế độ và cường độ mặc định là cường độ thấp nhất trong 20 phút, do vậy :
 - ✓ Để thay đổi chế độ massage, ấn phím “M” cho đến chế độ bạn mong muốn.
 - ✓ Để thay đổi cường độ massage, bấm nút “+” hoặc “-”.
- Để điều chỉnh thời gian bấm nút “T” để chọn thời gian bạn mong muốn từ 10 đến 60 phút.
- Bạn có thể ngừng massage bất cứ lúc nào bằng việc ấn nút tạm dừng. Bạn cũng có thể chọn chế độ massage bằng việc ấn nút “M” một lần nữa.
- Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ cường độ thấp lần đầu tiên sử dụng , sau đó tăng dần lên. Khi đã sử dụng quen, bạn có thể tăng cường độ đến mức bạn có thể chịu được để kích thích các sợi cơ mà không làm tổn thương bạn.

- Thời gian massage tối ưu cho 1 vị trí là 20 phút và 1 -2 lần/ngày. Thời gian cũng có thể được kéo dài hơn do nhu cầu của người sử dụng. Máy sẽ tự động tắt sau khi đạt đến thời gian bạn đã thiết lập. Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy tắt máy vài giây sau đó khởi động lại.
- Màn hình máy sẽ khóa trong quá trình hoạt động, để mở khóa màn hình ấn nút trung tâm – nút “tạm dừng” trong 3 giây, bấm một lần nữa trong 3 giây để mở khóa màn hình.

6. Sạc

Sạc thiết bị bằng adapter hoặc dây USB.

Lưu ý: Sạc pin cho thiết bị 3 tháng/1lần nếu bạn không sử dụng thiết bị thường xuyên.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**