

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Máy massage cầm tay Lanaform Multi Mass của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy massage cầm tay Lanaform Multi.
- Adapter.
- 2 phụ kiện massage đi kèm.
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, Phiếu bảo hành sản phẩm.



1. Chức năng cơ bản:

- Massage rung có thể điều chỉnh cường độ
- Có đèn hồng ngoại
- Tay cầm có thể tháo rời.


2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- Kiểm tra điện áp của nguồn điện và thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị quá 10 phút trên 1 vùng cơ thể, nên sử dụng chỉ tối đa 20 phút trong 1 lần sử dụng.
- Tắt để làm mát thiết bị ít nhất 30 phút sau mỗi lần sử dụng.
- Tắt thiết bị khi cắm vào hoặc rút ra khỏi nguồn điện.
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
- Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:
 - Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
 - Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
 - Bạn đang bị bệnh tiểu đường
 - Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.
- Không để các thiết bị bị tắc bởi tóc, xơ, bụi...

3. Hướng dẫn sử dụng:

MÔ TẢ THIẾT BỊ

- 1) Công tắc Bật / Tắt / massage / massage + Nhiệt hồng ngoại
- 2) Nút điều chỉnh cường độ massage
- 3) Dây đeo có thể điều chỉnh cho mặt sau của bàn tay
- 4) Đầu massage hồng ngoại
- 5) Tay cầm có thể tháo rời
- 6) Nút tháo tay cầm
- 7) Vỏ bọc thiết bị
- 8) Phụ kiện massage
- 9) Phụ kiện massage bấm huyết

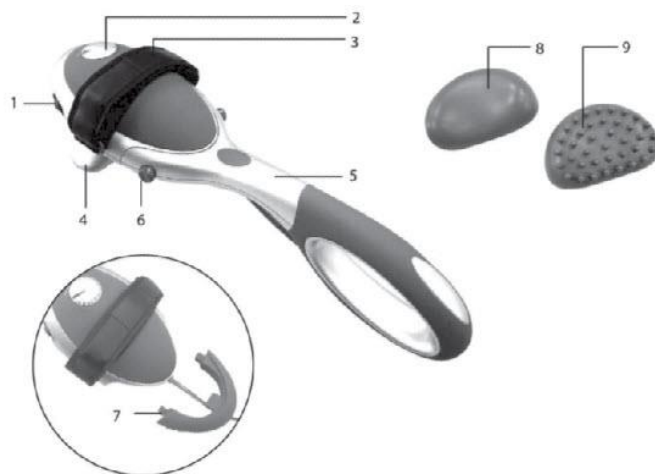

- Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện, chắc chắn rằng thiết bị đang ở trạng thái tắt.

- Tùy chọn các chức năng:

+ M: Chỉ massage

+ M+H: Massage với đèn hồng ngoại

Bạn có thể sử dụng thêm 2 phụ kiện đi kèm trong quá trình massage.

+ Massage nhẹ nhàng, thông thường (Hình 8)

+ Massage bấm huyết (Hình 9)


Để chọn cường độ massage: từ từ xoay nút điều chỉnh từ “Lo” đến “Hi”.

- Để bỏ tay cầm và chỉ sử dụng đầu massage:

+ Bấm đồng thời vào 2 nút theo hình, sau đó lắp lại vỏ bọc thiết bị.

+ Điều chỉnh dây cho phù hợp với bàn tay và sử dụng massage thoải mái cho các vị trí trên cơ thể.

+ Để massage phần lưng, nên lắp lại tay cầm.

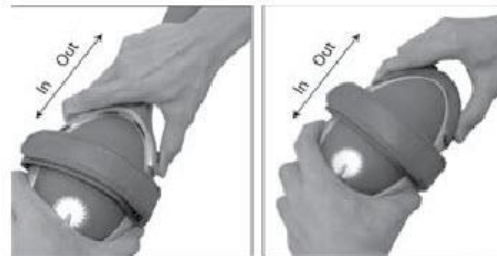

4. Làm sạch thiết bị:

- Tắt và ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện, để vài phút trước khi lau chùi.

- Làm sạch bằng khăn ẩm, mềm. Không để nước và các chất lỏng khác tiếp xúc trực tiếp vào thiết bị.

- Không nhúng nó vào thiết bị để làm sạch.

- Không sử dụng bàn chải, các chất tẩy rửa để làm sạch máy.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**