



1. Chức năng cơ bản:

- Đầu massage dựa trên mô phỏng của 4 ngón tay mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu, thoải mái.
- Massage rung có thể điều chỉnh cường độ với 2 cấp độ massage.
- Có đèn hồng ngoại

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:


- Kiểm tra điện áp của nguồn điện và thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị quá 10 phút trên 1 vùng cơ thể, nên sử dụng chỉ tối đa 20 phút trong 1 lần sử dụng.
- Tắt để làm mát thiết bị ít nhất 30 phút sau mỗi lần sử dụng.
- Tắt thiết bị khi cắm vào hoặc rút ra khỏi nguồn điện.
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
- Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:
 - Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
 - Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
 - Bạn đang bị bệnh tiểu đường
 - Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.
- Không để các thiết bị bị tắc bởi tóc, xơ, bụi...

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Máy massage mô phỏng ngón tay Lanaform Finger Mass của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy massage mô phỏng ngón tay Lanaform Finger Mass
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt,
- Phiếu bảo hành sản phẩm.

3. Hướng dẫn sử dụng:

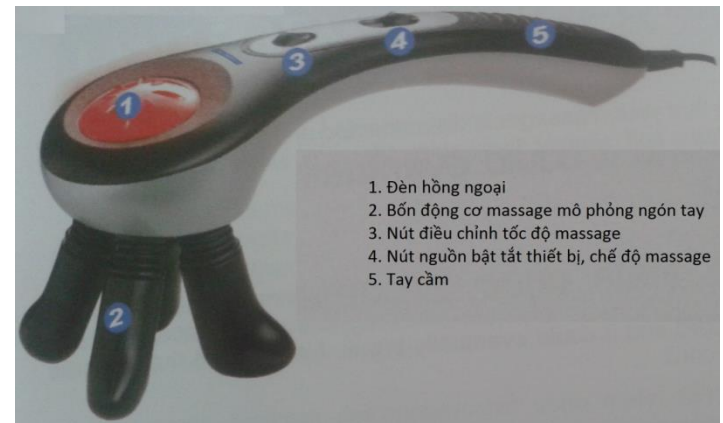

- Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện, chắc chắn rằng thiết bị đang ở trạng thái tắt.
- Tùy chọn các chức năng:
 - + M: Chỉ massage
 - + M+H: Massage với đèn hồng ngoại
- Để chọn cường độ massage: chọn nút điều chỉnh chế độ “Lo” hoặc “Hi”.

4. Làm sạch thiết bị:

- Tắt và ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện, để vài phút trước khi lau chùi.
- Làm sạch bằng khăn ẩm, mềm. Không để nước và các chất lỏng khác tiếp xúc trực tiếp vào thiết bị.
- Không nhúng nó vào thiết bị để làm sạch.
- Không sử dụng bàn chải, các chất tẩy rửa để làm sạch máy.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**