

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Nhiệt kế điện tử đầu mềm Lanaform DT-100 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Nhiệt kế điện tử kèm theo pin
- Phiếu bảo hành
- HDSD tiếng Anh và tiếng Việt.



1. Một số lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm:

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử dụng sản phẩm.
- Không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc bụi bẩn.
- Không thả nhiệt kế vào nước
- Nhiệt kế phải được sử dụng tại môi trường có nhiệt độ từ 10°C - 35°C (50-95°F).
- Không sử dụng nhiệt kế tại các vùng tiếp xúc gần với điện tử như điện thoại di động.
- Chờ ít nhất 30 phút sau khi tắm, tập thể dục, ăn uống để đo nhiệt độ chính xác nhất.
- Nhiệt độ cơ thể thấp nhất vào buổi sáng và tăng dần lên trong suốt cả ngày. Do vậy bạn nên đo nhiệt độ vào cùng thời gian trong các ngày để theo dõi nhiệt độ chính xác nhất.
- Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín đã sử dụng bình xịt và có nhiệt độ trên 40 độ C.
- Nhiệt kế chỉ được sử dụng trong nhà. Kết quả sẽ bị sai lệch nếu bạn sử dụng ngoài trời.
- Nhiệt độ đo tối đa là 55°C và -25°C (hay 131°F và 13°F).
- Không sử dụng nhiệt kế nếu độ ẩm trên 80% hoặc dưới 25%.

2. Tính năng

- Đo hậu môn, miệng và nách.
- Cho kết quả trong vòng 15 giây.
- Báo động khi phát hiện nhiệt độ cao.
- Một tiếng “bíp” ngắn báo hiệu nhiệt kế bắt đầu hoạt động.
- Một tiếng “bíp” dài sau 15 giây báo hiệu nhiệt độ nhiệt độ dưới 37,8°C (98,6°F).
- Ba tiếng “bíp” ngắn liên tục sau 15 giây báo hiệu nhiệt độ trên 37,8°C (98,6°F).
- Nhiệt kế tự động tắt sau 10 giây không hoạt động.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Giá trị của nhiệt độ sẽ khác nhau tùy vào từng vị trí đo nhiệt độ trên cơ thể. Đối với những người có sức khỏe tốt, sai số từ 0,2 - 1°C (0,4-1,8°F) trên các bộ phận khác nhau của cơ thể.
- Giá trị nhiệt độ nhiệt kế sử dụng:

	Giá trị nhiệt độ	Nhiệt kế sử dụng
Nhiệt độ trán	35.8°C - 37.8°C (96.4°F - 98.6°F)	Nhiệt kế đo trán
Nhiệt độ tai	35.8°C - 38°C (96.44°F - 100.4°F)	Nhiệt kế đo tai
Nhiệt độ miệng	35.5°C - 37.5°C (95.9°F - 98.6°F)	Nhiệt kế thông thường
Nhiệt độ trực tràng (hậu môn)	36.6°C - 38°C (96.8°F - 100.4°F)	Nhiệt kế thông thường


Nhiệt độ bình thường theo độ tuổi (°C)

Độ tuổi	Nhiệt độ
0-2 tuổi	36,4 -38
3 - 10 tuổi	36,1 – 37,8
11 – 65 tuổi	35,9 – 37,6
>65 tuổi	35,8 – 37,5

Mô tả thiết bị:


Lanaform sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp bảo trì, bảo quản, vệ sinh không theo hướng dẫn của Lanaform.

STRUCT DESCRIPTION

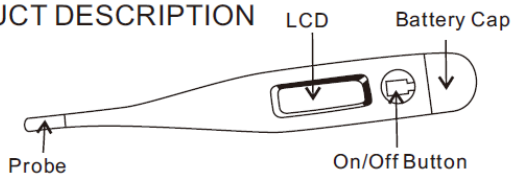

1. Màn hình hiển thị LCD
2. Nút bật / tắt (ON/OFF)
3. Nắp khoang pin (Battery Cap)
4. Đầu dò đo nhiệt (Probe)

Cài đặt pin:

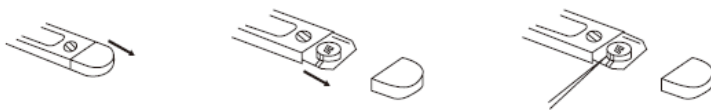

- Mở nắp khoang pin
- Lắp pin LR41 vào khoang pin, đặt pin theo đúng cực âm (-) và cực dương (+) theo biểu tượng trong khoang pin.
- Đóng nắp và sử dụng
- Cài đặt đơn vị đo nhiệt: ấn nút nguồn liên tục trong 3 giây để chọn đơn vị đo lường. Sau 3 giây màn hình sẽ hiển thị °C hay °F.

Hướng dẫn sử dụng:

- Để bắt đầu, ấn nút ON/OFF sẽ có tín hiệu âm thanh ngắn chỉ ra rằng thiết bị đã hoạt động và tất cả các biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình trong 1 giây.
- Biểu tượng “Lo°C” (“Lo°F”) và giá trị của lần đo cuối cùng được thực hiện (chức năng bộ nhớ) xuất hiện một thời gian ngắn trên màn hình.
- Biểu tượng “°C” (“°F”) nhấp nháy, nhiệt kế sẵn sàng để sử dụng.
- Quá trình đo kết thúc sau 15 giây và có tiếng “bíp” dài nếu nhiệt độ ổn định và 3 tiếng “bíp” ngắn liên tục báo hiệu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

Lưu ý: Nếu nhiệt độ đo được dưới 32°C (89,6°F) biểu tượng “Lo°C” (“Lo°F”) sẽ nhấp nháy trên màn hình và nhiệt độ đo được trên 42,9°C (109,9°F) biểu tượng “Hi°C” (“Hi°F”) sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị.

4. Bảo quản, bảo trì

- Dùng miếng vải sạch có thấm dung dịch cồn nhẹ để vệ sinh. Không đun sôi hoặc nhúng nhiệt kế vào nước sôi để vệ sinh.
- Khi không sử dụng, cất nhiệt kế vào hộp.
- Tháo pin nếu không sử dụng nhiệt kế trong 3 tháng.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**