

LANAFORM®



1. Chức năng cơ bản:

- Đo trán, đo tai
- Đo nhiệt độ môi trường.
- Cho kết quả trong 1s.

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:


- Luôn giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt như bếp, bộ tản nhiệt....
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Không thả trực tiếp vào nước.
- Nhiệt độ hoạt động của thiết bị từ 16oC đến 40oC.
- Không để nhiệt kế trong điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ bảo quản từ: -20oC đến 50oC.
- Không sử dụng thiết bị nếu độ ẩm tương đối > 95%.
- Độ chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng khi trán được bao phủ bởi mái tóc, mồ hôi, mũ và khăn...
- Chúng tôi khuyên bạn nên giữ nhiệt kế trong phòng 10 phút trước khi sử dụng nó.
- Nhiệt kế điện tử hồng ngoại chỉ được dùng để đo nhiệt độ cơ thể ở tai và trán, không sử dụng để đo bằng miệng hoặc dưới cánh tay.
- Độ chính xác: +/- 0.2oC
- Pin sử dụng được 5000 lần đo.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 trong 1 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Nhiệt kế điện tử Lanaform 4 trong 1
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt
- Phiếu bảo hành sản phẩm.

3. Hướng dẫn sử dụng:

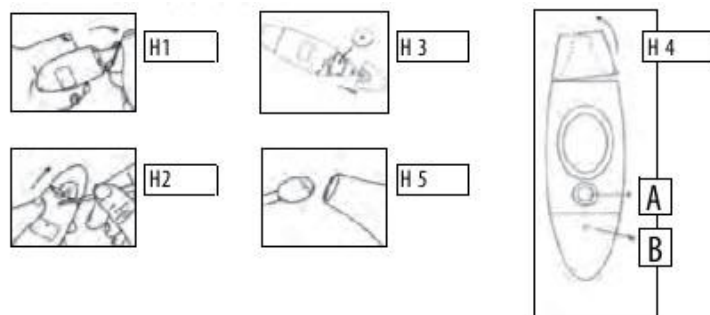

3.1. Thay pin

- Sử dụng 1 công cụ và nhấn để thay pin (Hình 2)
- Chuẩn bị sẵn sàng 1 viên pin lithium 3v loại CR2032
- Tháo pin và thay vào nó 1 pin mới (Hình 3)
- Thay thế nắp pin (Hình 4)

3.2. Thiết lập thời gian

- Sử dụng 1 công cụ và nhấn để tháo nắp (Hình 2)
- Ấn nút B (Hình 4) để thiết lập đồng hồ
- Để cài đặt giờ bấm nút A (Hình 4)
- Để thiết lập ấn nút B 1 lần nữa, và ấn nút A để thiết lập phút.
- Thiết lập xong thời gian, ấn nút B và lắp vỏ vào.

3.3. Hoạt động của nhiệt kế

- Nhiệt độ trung bình của con người theo vị trí đo và theo độ tuổi

Vị trí đo	Nhiệt độ °C
Trực tràng	36,6 đến 38
Miệng	35,5 đến 37,5
Nách	34,7 đến 37,3
Tai	35,8 đến 38

Theo độ tuổi	Nhiệt độ °C
0 đến 2 tuổi	36,4 đến 38
3 đến 10 tuổi	36,1 đến 37,8
11 đến 65 tuổi	35,9 đến 37,6
> 65 tuổi	35,8 đến 37,5

- Nhiệt độ của cơ thể có thể thay đổi theo 1 số yếu tố như: tuổi, thời gian trong ngày, hoạt động thể chất, nhiệt độ ngoài trời, và đặc biệt các trường hợp đo trán bị ảnh hưởng bởi(da nhờn, khô, nhẵn hoặc không nhẵn, nhiệt độ xung quanh có điều hòa máy lạnh...)

- Trong trường hợp là trẻ em thì nhiệt độ đo ở tai gần với nhiệt độ trực tràng.

- Nhiệt độ đo trán và tai có sự khác biệt khoảng 0,5oC.

3.4. Lựa chọn đo

- Nhấn On (nút A) để chọn nhiệt độ đo (oC/oF), một màn hình xuất hiện tất cả các biểu tượng hiện ra.

- Sau 1 vài giây, màn hình thứ 2 xuất hiện với biểu tượng đo tai hay trán. Bấm On (nút A) một lần nữa để chọn chế độ mong muốn.

3.5. Đo nhiệt độ tai

- Tháo nắp như Hình 1.

- Nhấn On (nút A) để chọn chế độ đo tai như ở phần trên.

- Chờ cho đến khi có 2 tín hiệu âm thanh phát ra chỉ ra rằng việc đo nhiệt độ có thể thực hiện

- Nếu đây là lần đầu tiên nhiệt kế sử dụng khi cài đặt hoặc thay pin, nó sẽ chỉ ra 1 giá trị mặc định là 36,8oC.

- Đặt nhiệt kế vào tai và ấn giữ nút On (A), một mũi tên sẽ xuất hiện ở phía trên màn hình, chỉ ra rằng nhiệt độ đang được thực hiện.

- Chờ tín hiệu âm thanh phát ra, báo quá trình đo hoàn thành., sau đó đọc kết quả trên màn hình.

- Phạm vi đo của nhiệt kế Lanaform từ 32oC đến 43oC.

- Để có các kết quả đo chính xác, bạn nên chờ đợi khoảng 5 giây giữa các lần đo.

3.6. Đo nhiệt độ trán

- Khi đo nhiệt độ trán, không phải tháo nắp vỏ cảm biến.

- Nhấn nút On 1 thời gian để kích hoạt thiết bị và chọn chế độ đo trán.

- Sau 2 tiếng bíp quá trình đo có thể thực hiện.

- Đặt nhiệt kế lên trán ấn giữ phím On, mũi tên xuất hiện trên màn hình, đưa nhiệt kế theo chiều dài của trán và thả nút On, khi tín hiệu âm thanh phát ra có nghĩa rằng quá trình đo hoàn tất, sau đó đọc kết quả trên màn hình.

4. Làm sạch thiết bị:

- Tắt thiết bị trước khi làm sạch.

- Lấy tăm bông cotton để làm sạch thiết bị trước khi sử dụng (Hình 5).

- Sử dụng 1 lớp vải khô mềm làm lau sạch phần thân thiết bị.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**